

Haico PRO3


Haico

De referentie voor paarden operatietafels!

Elk jaar krijgen meer dan **90.000 paarden wereldwijd** chirurgische hulp op een **HAICO-tafel!** Deze operatietafel voor paarden is de meest gebruikte ter wereld. De kwaliteit is onovertroffen en het is **echt de maatstaf** voor operatietafels voor paarden.

Kenmerken

- 4-weg kanteling - nieuwe laterale kanteling +/- 15% ideaal bij abdominale chirurgie voor decompressie van cecale overbelasting en in laterale decubitus!
- Tafelblad verkrijgbaar in twee verschillende maten: Middelgroot en groot
- Alle zijpanelen zijn gemakkelijk te verwijderen.
- Hoofdsteun kan zijdelings worden bewogen.
- De bedieningsknoppen bevinden zich aan de voorkant voor gemakkelijke toegang tijdens het gebruik.
- Twee snelheden op de lift voor onbeladen / beladen tafel.
- Nieuwe speciale behandeling op alle metalen oppervlakken
- Speciale batterij
- Minimumhoogte slechts 30 cm (1 ft)
- Volledig geladen met alle beschikbare accessoires
- Kwaliteits- en testrapport inbegrepen

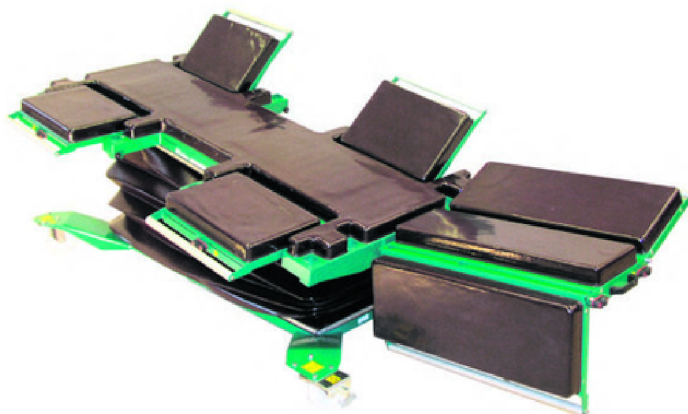


Technische gegevens

Afmetingen

- Tafelblad met hoofdsteen: 300 x 140 cm of 280 x 140 cm
- Tafelhoofdsteen: 40 x 85 cm of 30 x 85 cm
- Tafelbreedte zonder zijpanelen: 50 cm
- Zijpanelen - tafel: 46 x 37 cm
- Zijpanelen - hoofdsteen: 30 x 50 cm
- Wielen: Ø15 cm
- Dikte bekleding: 5 cm
- Gewicht: ca. 550 kg

Aanpasbaar

- Minimale hoogte: 34 cm
- Maximale hoogte: 110 cm
- Bekkenhoek: +/-25
- Hoofdsteen hoek: +/-25
- Zijwaartse hoek: +/-12
- Hoofdsteen: verwijderbaar
- Zijhoofdsteen : verwijderbaar
- Zijpanelen : verwijderbaar
- Bedieningsknoppen : voorzijde en zijkanten

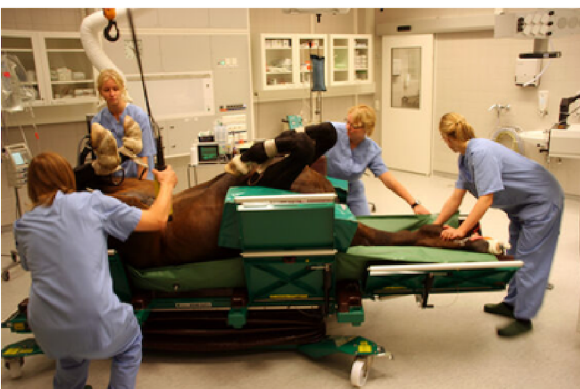

Laden

- Maximale belasting: 1300 kg
- Heffen met twee snelheden :
- Normaal: 35 sec.
- Snel (tabel niet geladen): 15 sec.

Elektrisch materieel

- Bedrijfsspanning: 12 V
- Batterij: 12 V 38 Ah, 10 jaar
- Automatische batterijlader uitgang: 12 V 10 A
- Lader-ingang: 110 V / 240 V AC / 50-60 Hz
- Oplaadtijd batterij: 6 uur
- Volle batterij: ca.30 liften
- Draadloze afstandsbediening
- Beschikbaarheid van de transporteenheid
- De tafel kan gebruikt worden tijdens het opladen

Oppervlaktecoating

- Aluminium oxide stralen, dubbel verven

Uitrusting

- Complete uitrusting als standaard

